

Soundfr.


Kasutusjuhend

Komplekti sisu


1



2



3

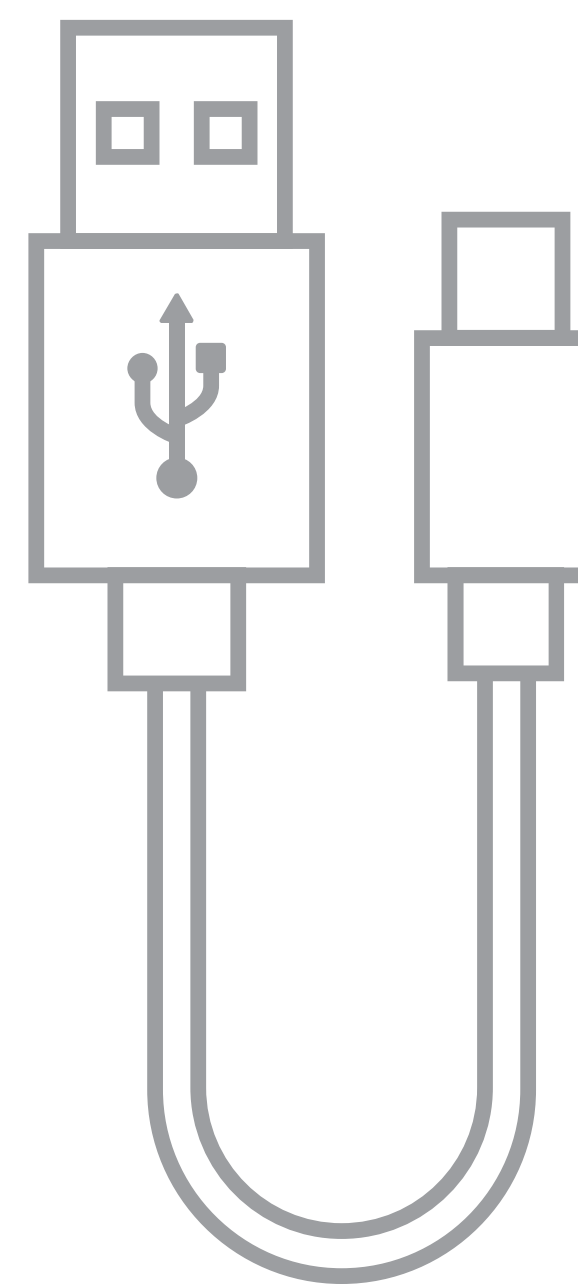

1

Mikrofon

2



Kasutusjuhend

3

USB-laadimiskaabel

Esmane Seadistamine


Ühenda seade kaasasoleva USB-kaabli abil seinapistiku adapterisse.

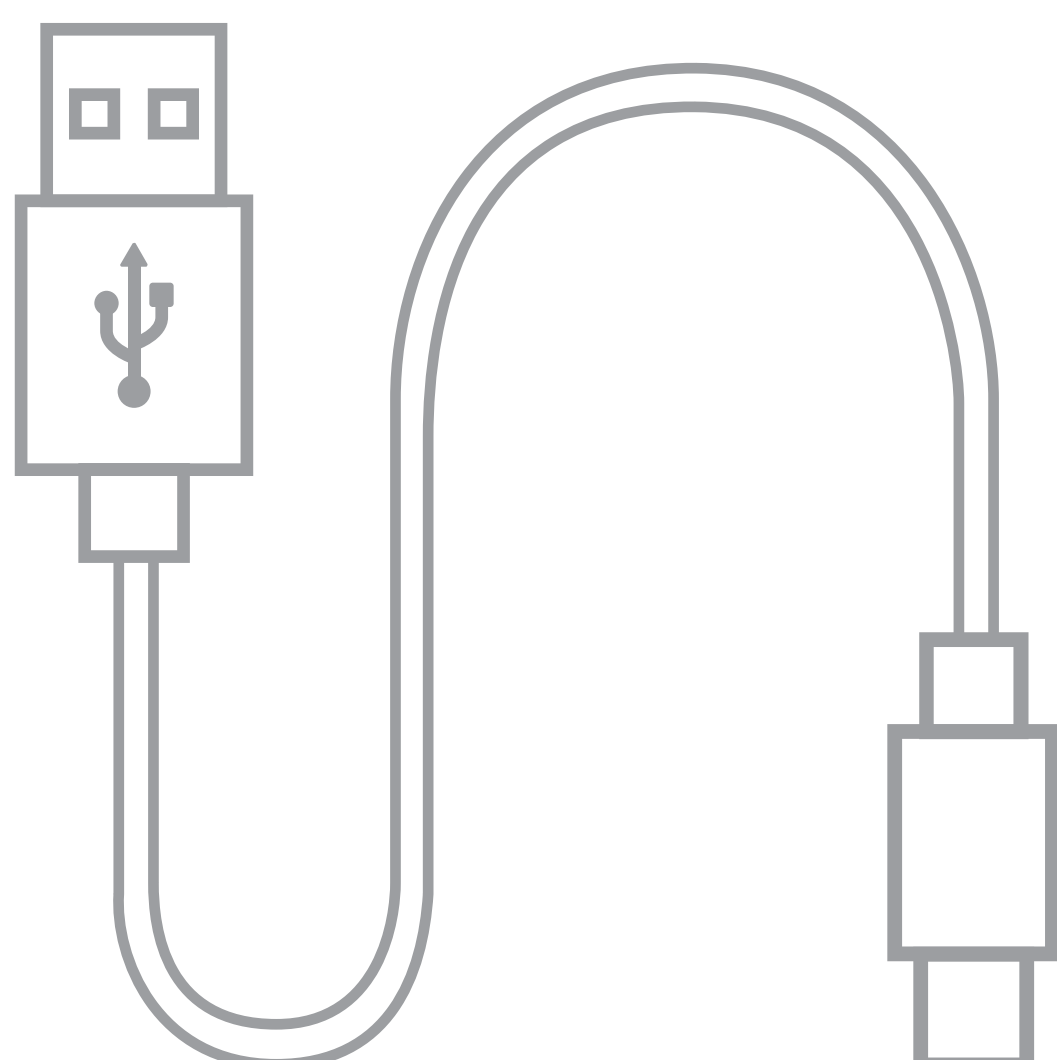


Mobiilirakenduse juhend

Konto registreerimine

Registreerige konto meie koduelehel minnes <https://www.soundfr.ee/sound-recognition> või skännige QR koodi.

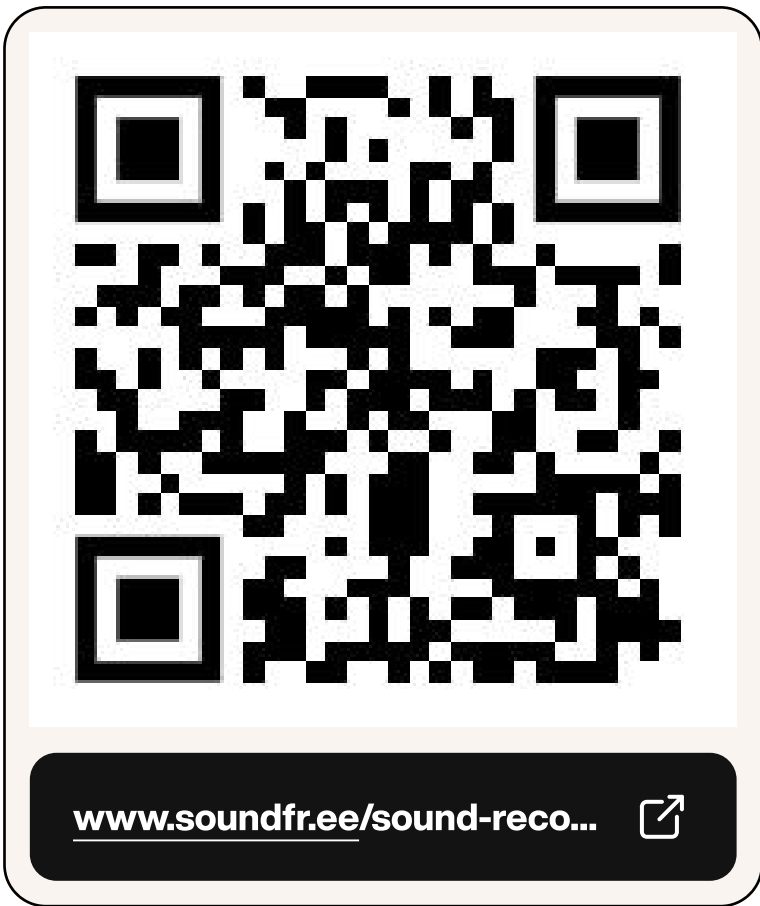


Peale registreerimist laadige alla meie mobiilirakendus

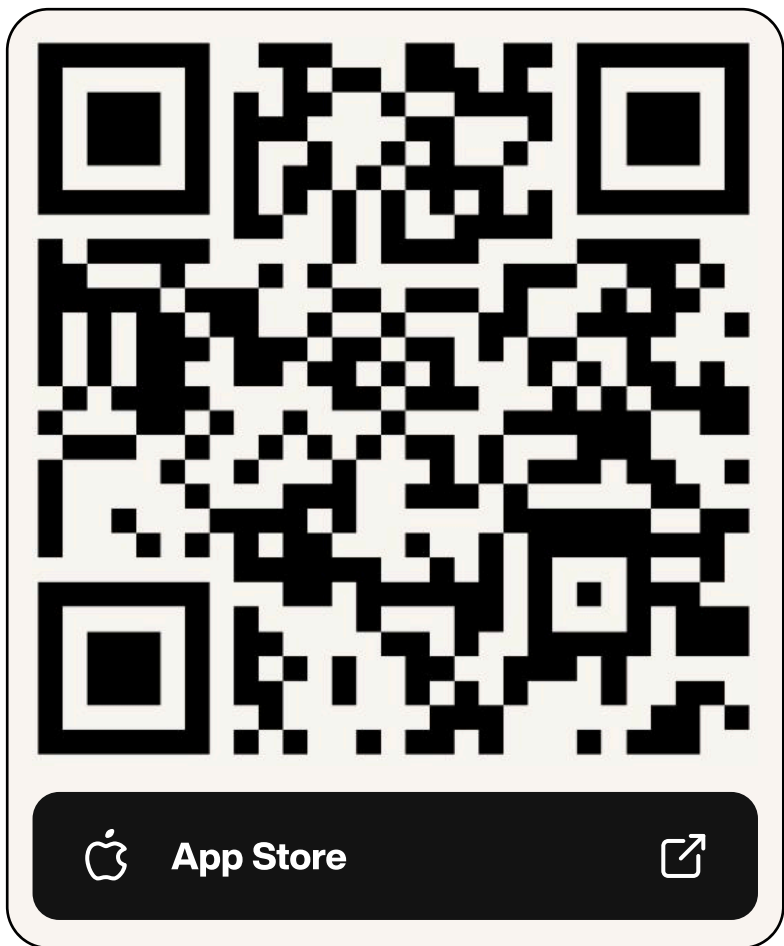


Rakenduse esmane sisselogimine

1. Ava rakendus ja vajutage “Alusta” nupule
2. Sisestage telefoninumber millega registreerisite konto
3. Sisestage 4-kohaline kood, mis saabub Teie telefoni SMS-ga

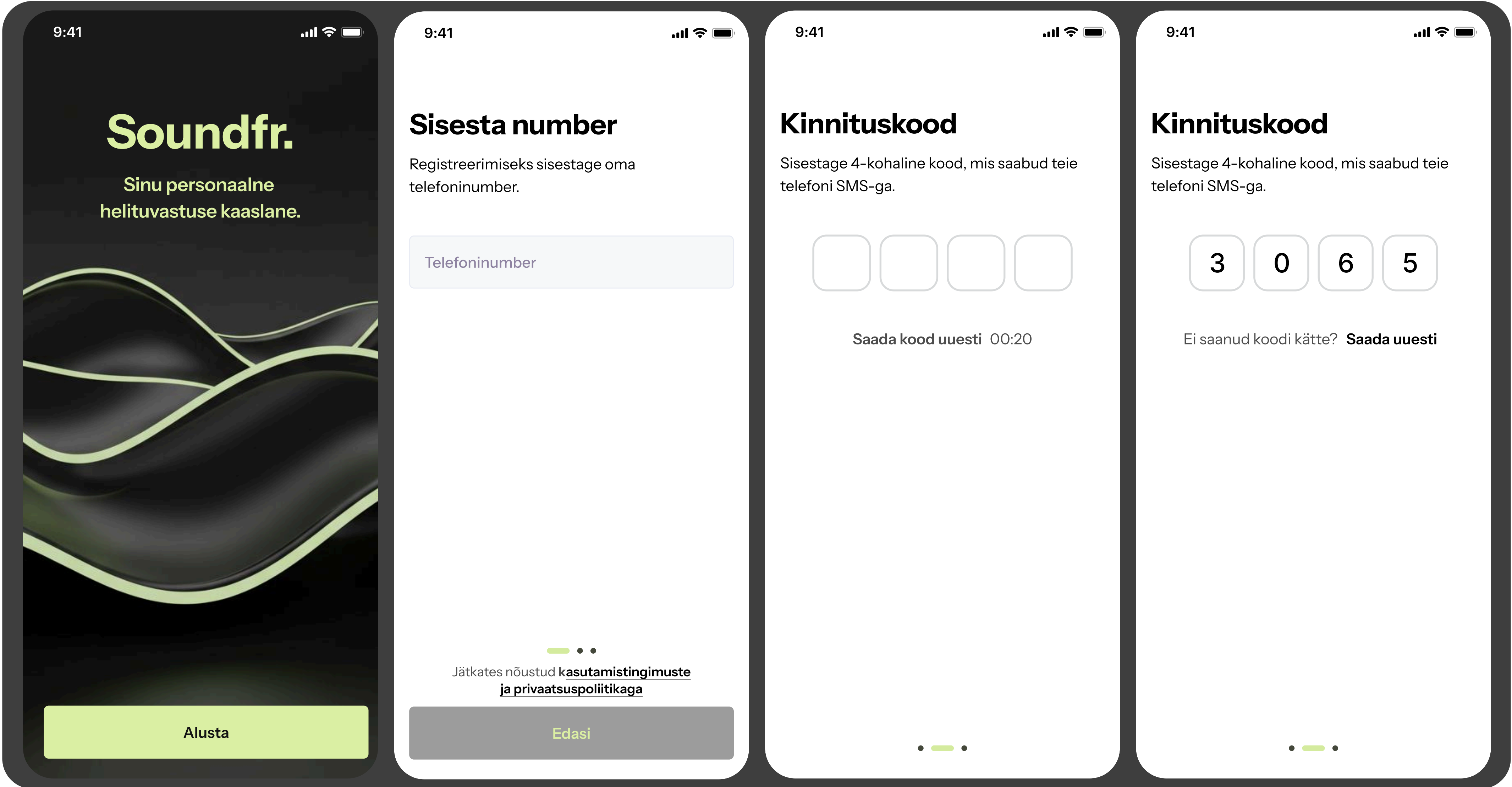


4. Luba Soundfr rakendusel saada teavitusi ja asukohta.

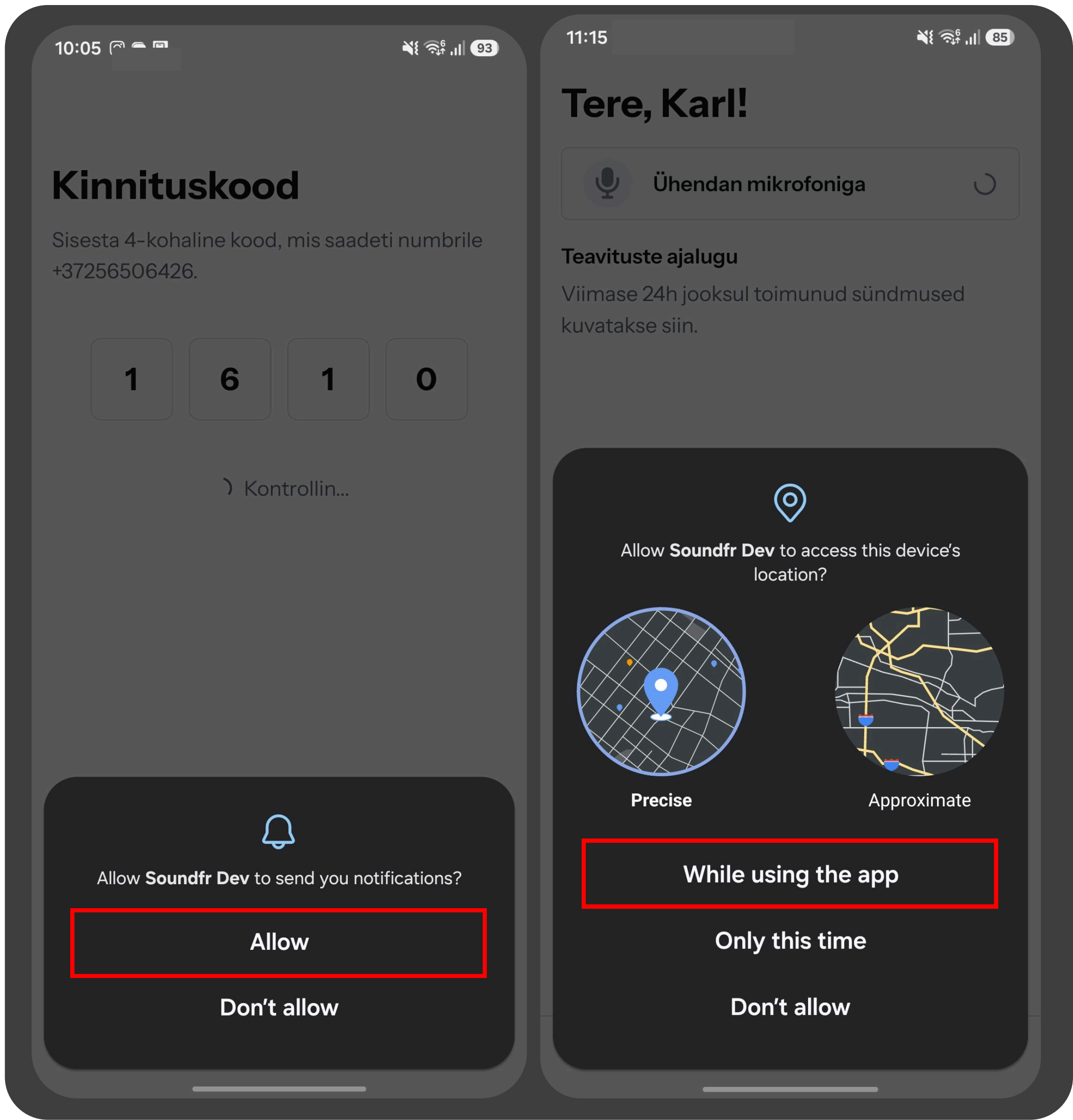


Mikrofoni ühendamine

- 1. Mikrofoni ühendamiseks vajuta nupule “Ühenda mikrofoni”
- 2. Luba juurdepääs kaamerale
- 3. Skaneeri mikrofoni tagaküljel asuv QR kood

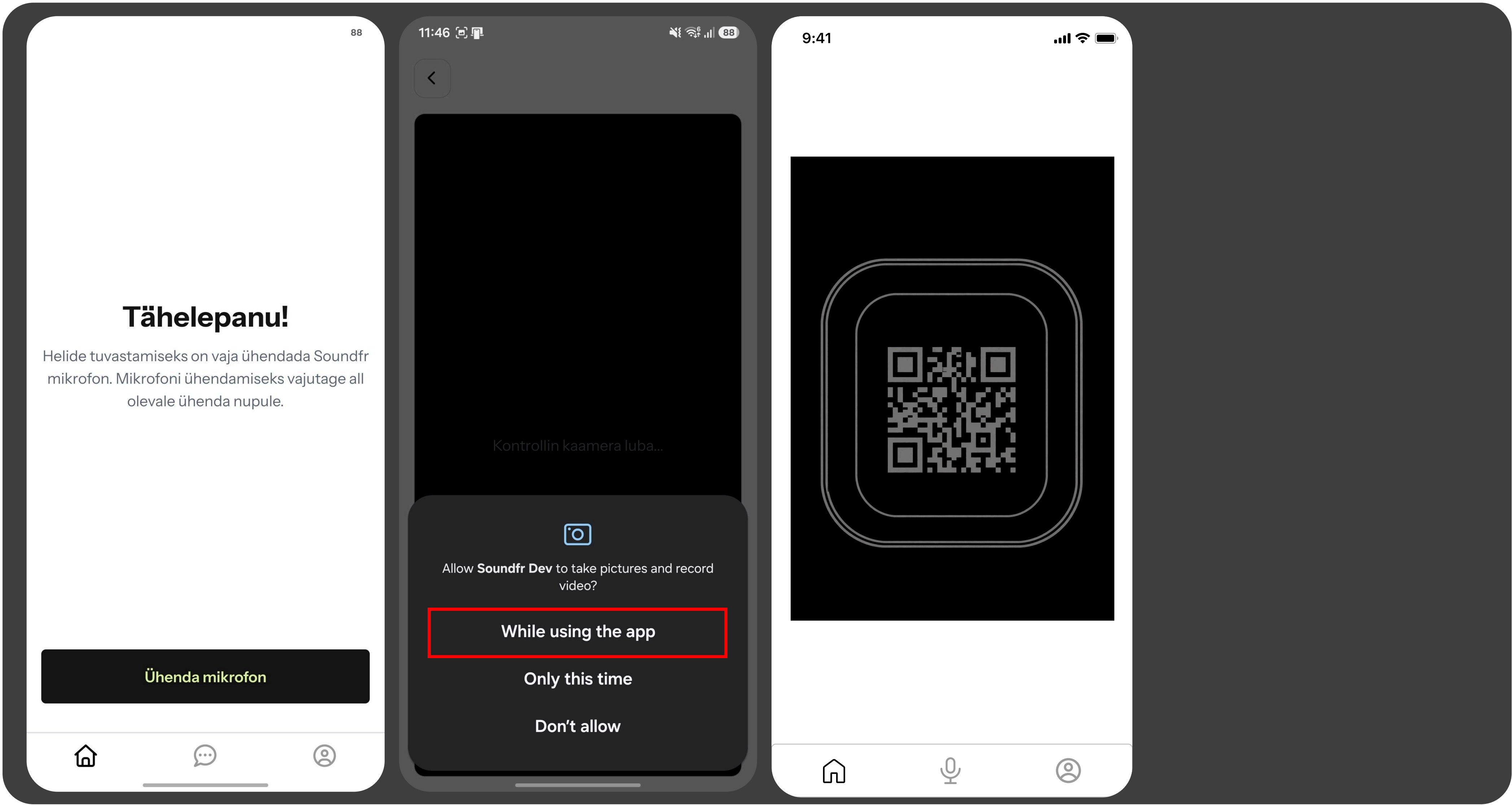

Wi-Fi andmete saatmine mikrofonile

1. Sisetage Wi-Fi nimi ja parool
2. Vajutage “Edasi” nupule
3. Oodake kuni rakendus saadab edukalt Wi-Fi andmed mikrofonile

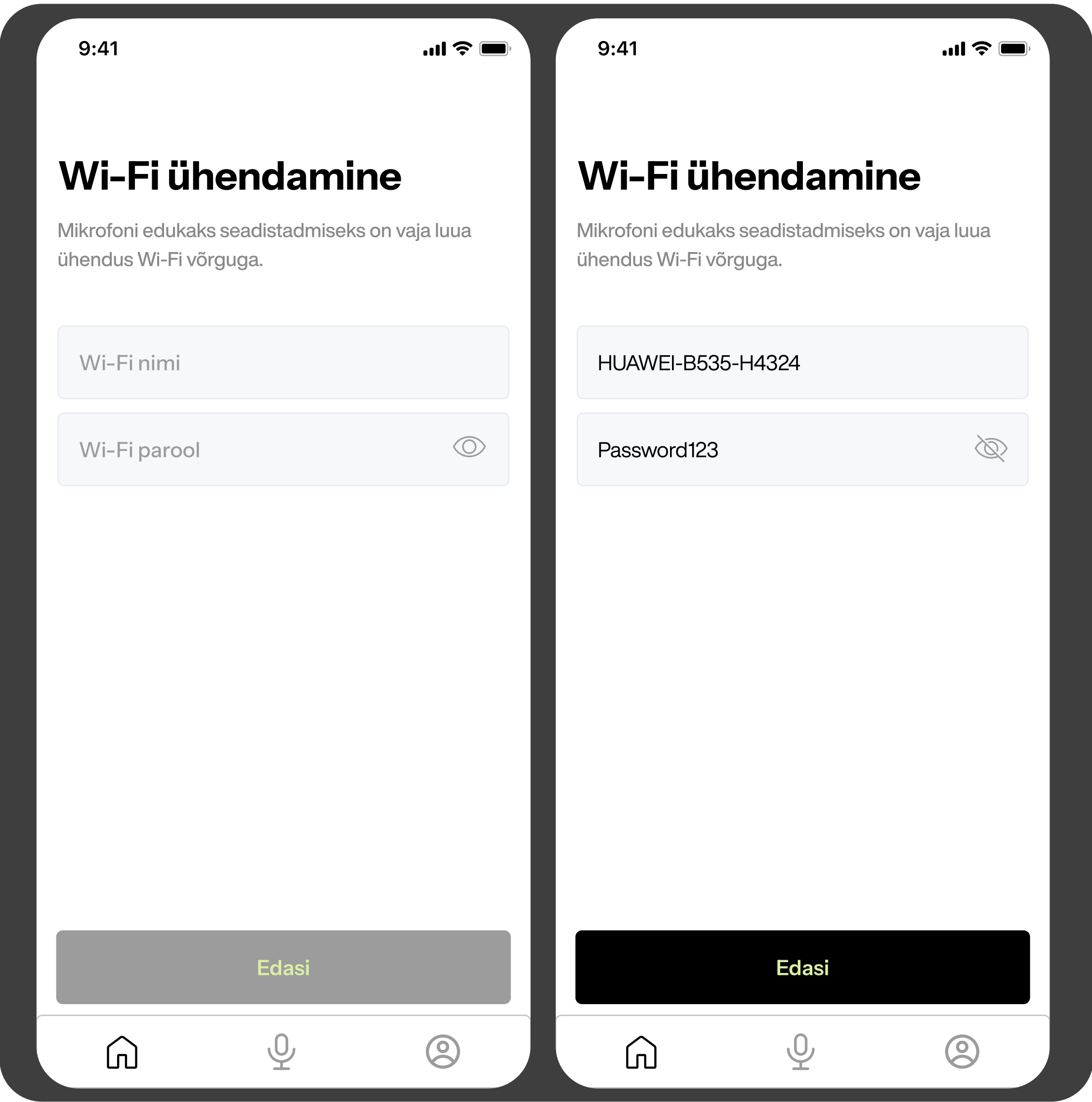

Helituvastuste ajalugu

Smartphone screen showing the 'Tere,' header, microphone status 'Mikrofon ühendatud', a list of events under 'Teavituste ajalugu' (Suitsuandur, Uksekell), a section for 'Seadistamisel helid' (Pesumasin), and a '+ Lisa heli' button at the bottom.

→ Mikrofoni riba näitab mikrfoni ühenduse staatust

- Mikrofon on ühendatud
- Mikrofoni ühendus on katkenud

→ Eeltreenitud tulealarm on valmis tuvastama

→ Uued treenitud helid kuvatakse siin

→ Seadistamisel olevad helid kuvatakse siin(helid mille pole piisavalt kordusi või vajavad veel heliklippide kinnitamist)

→ Uus heli on võimalik treenida vajutades “Uus heli”

Helide treenimine

Helide treenimiseks on kaks võimalust:

- „Salvesta ise” sobib helidele, mida saate kohe ja korduvalt tekitada, näiteks uksekell või uksele koputus.
- „Automaatne tuvastamine” sobib helidele, mida on raske tekitada, näiteks pesumasina lõpusignaali, koera haukumine või lapse nutt. Mikrofon jääb kuulama taustele soovitud heli ja pärast saate leitud heliklipid üle kuulata ja õiged salvestused kinnitada. Alustage salvestamist siis, kui ootate heli lähiajal.

Automaatne tuvastamine

Helide näited:

- Pesumasina lõpu heli
- Fonolukk
- Lapse nutt
- Koera haukumine


Salvesta ise

Helide näited:

- Uksele koputamine
- Uksekell
- Kodumasinade helid mida on lihtne korrata



Uue heli treenimine ise

1. Alustamiseks vajutage “Uus heli” nupule
2. Nimetage heli mida hakkate treenima
3. Kui olete valmis salvestama vajutage nupule “Alusta ettevalmistust”
4. Oota kuni nupp ”Olen valmis” aktiveerub ja vajuta nupule
5. Tekita heli ja oota kuni heli kvaliteet kinnitatakse
6. Salvesta vähemalt 4 sobivat kordust
7. Peale treenimist ilmub uus heli Teavituste ajalugu lehele

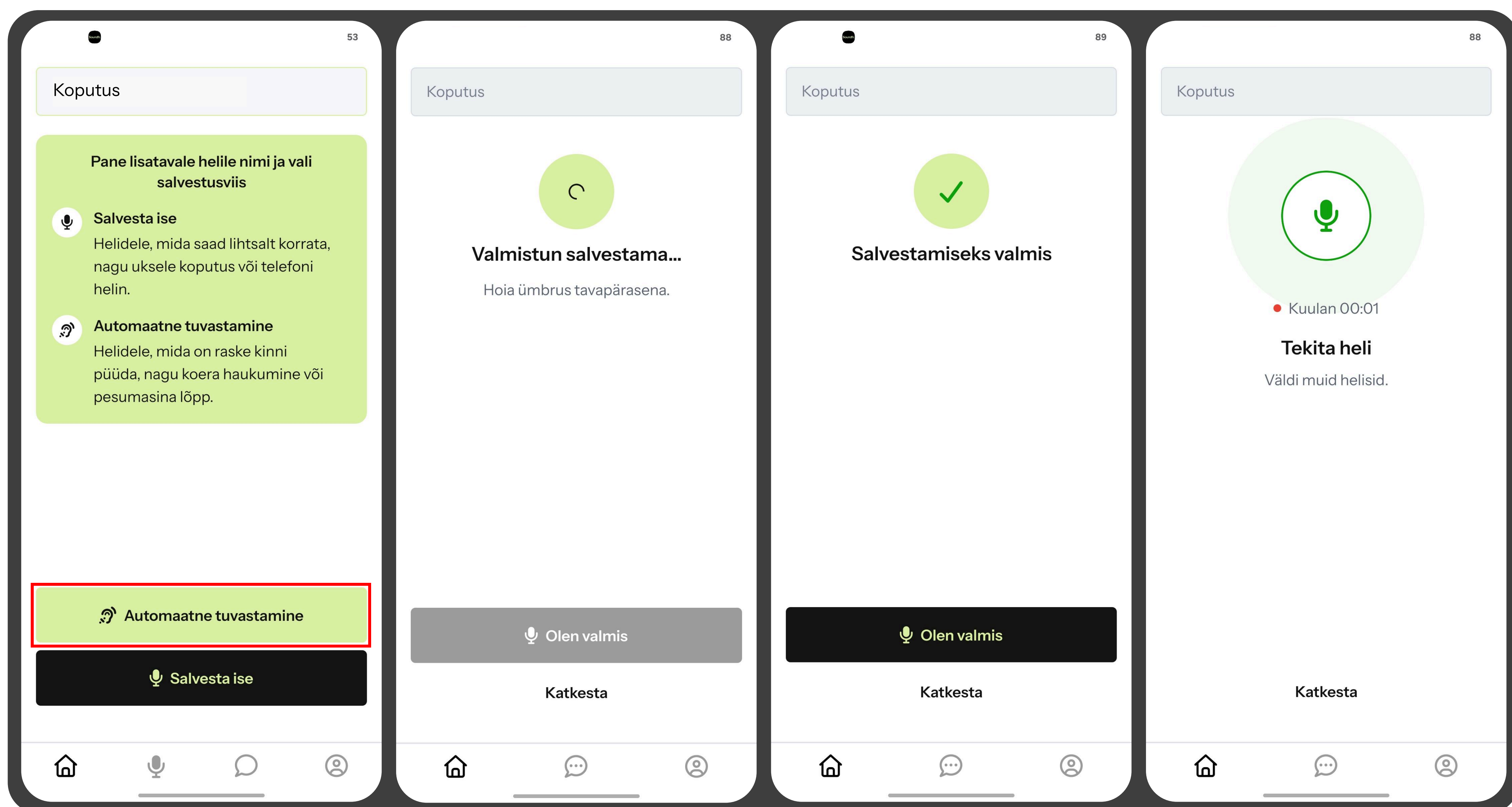

Automaatne uue heli treenimine

1. Alustamiseks vajutage nuppu „Uus heli”.
2. Andke helile nimi ja valige „Automaatne tuvastamine”.
3. Vajutage „Alusta automaatset tuvastamist”, peale mida hakkab lahendus kuulama ja sulgub automaatselt 1h pärast või vajutades “Lõpeta” nupule
4. Hoidke rakendus avatuna ja telefon koos mikrofoni internetiga ühenduses.
5. Kui tuvastamine on lõppenud, vajutage „Valmis” ja oodake kuni saadetakse leitud heliklipid kuulamiseks.

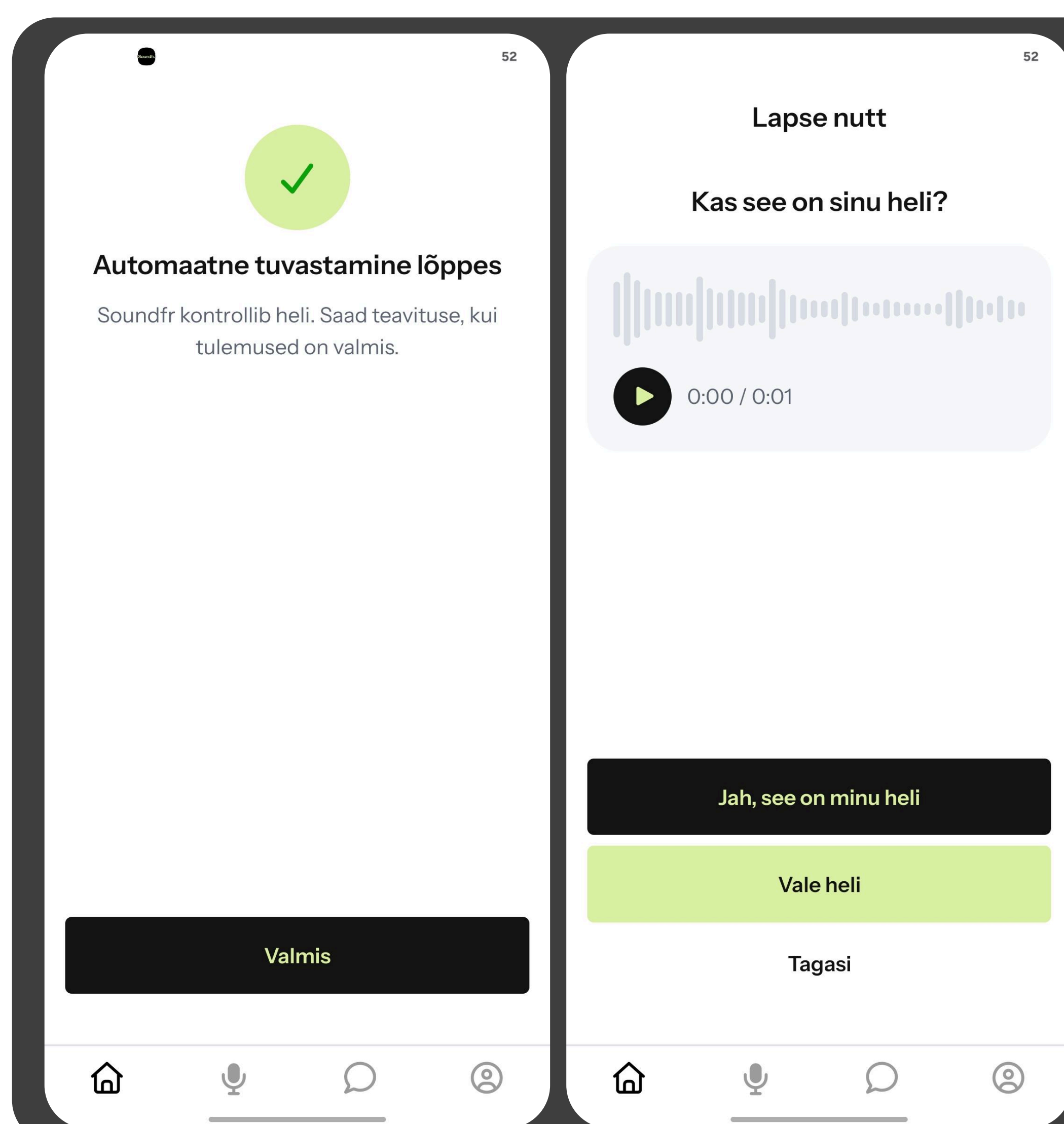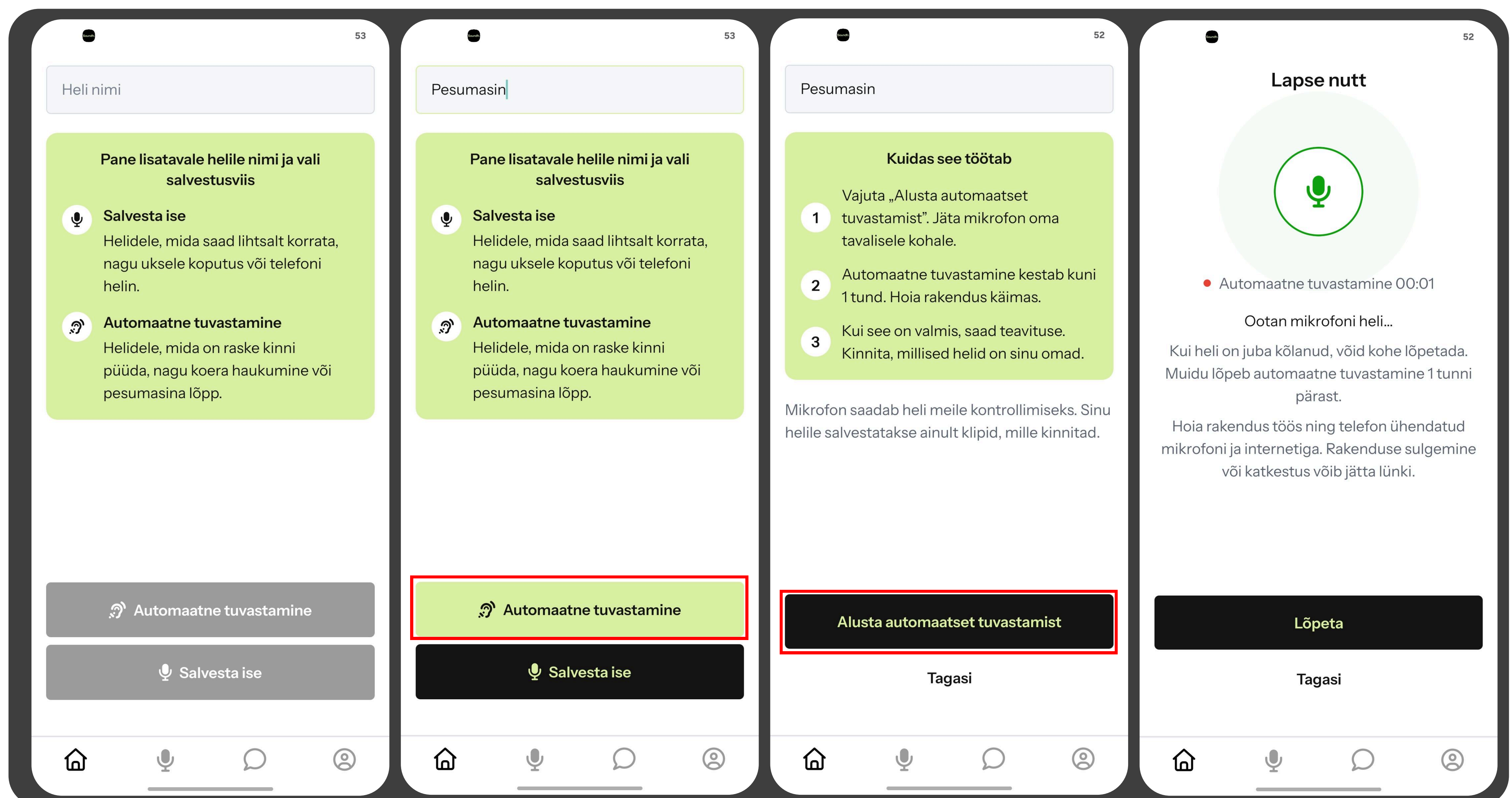


6. Kui see on õige heli, vajutage „Jah, see on minu heli”. Kui ei, vajutage „Vale heli”.

7. Korrake tuvastamist, kuni olete kinnitanud vähemalt neli sobivat salvestust. Vajaduse korral võite järgmise korduse ise salvestada.


8. Pärast heli treenimist ilmub uus heli „Teavituste ajaloo” lehele.

Kõne tekstiks

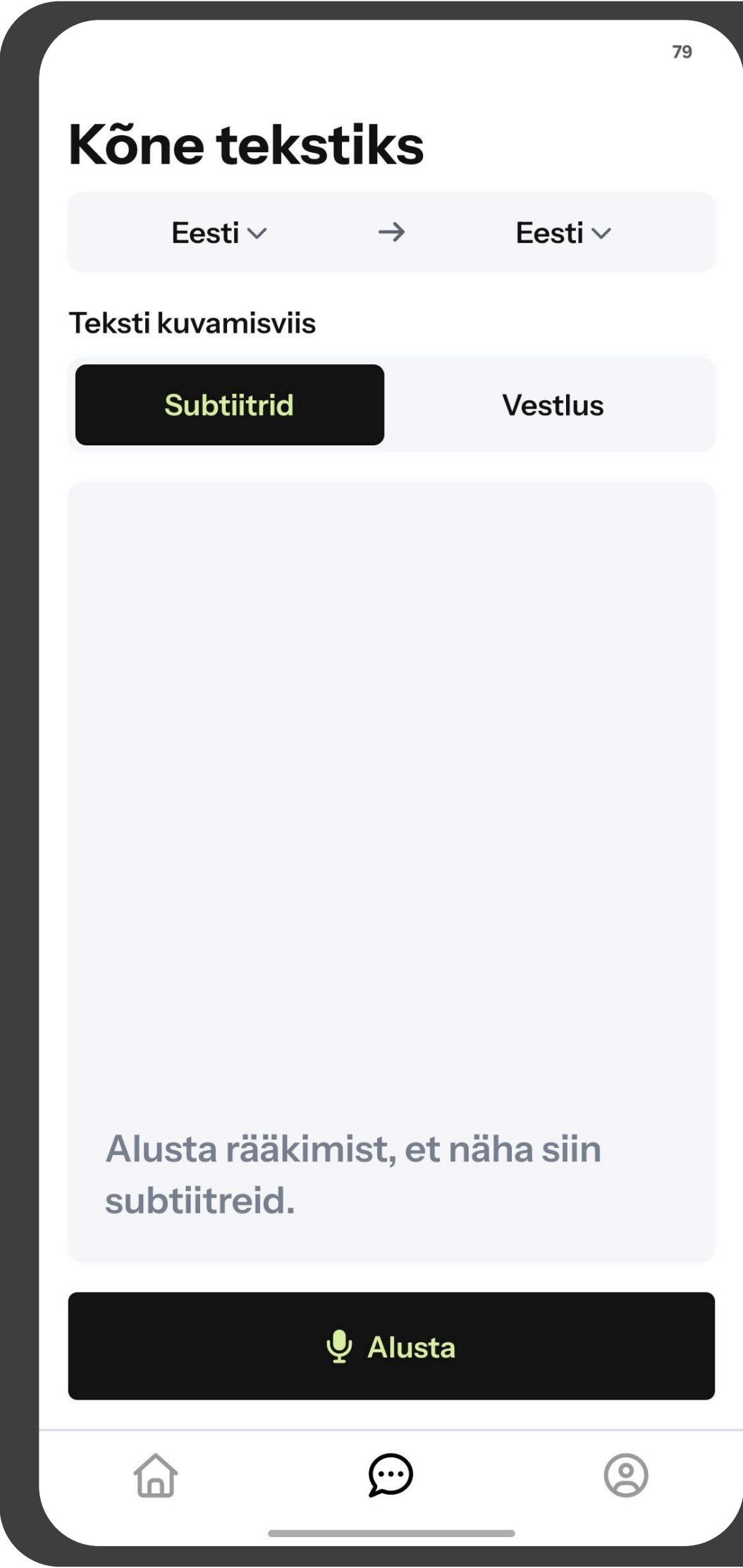

- Võimalik valida erinevate keelte vahel
- Võimalik on valida kahe funktsiooni vahel:
 - Subtiitrid: mõeldud räägitava kõne jälgmiseks
 - Vestlus: mõeldud kõne jälgimiseks ja tekstina vastamiseks
- Vajutades nupule “Alusta” algab transkribeerimine

Profilivaade

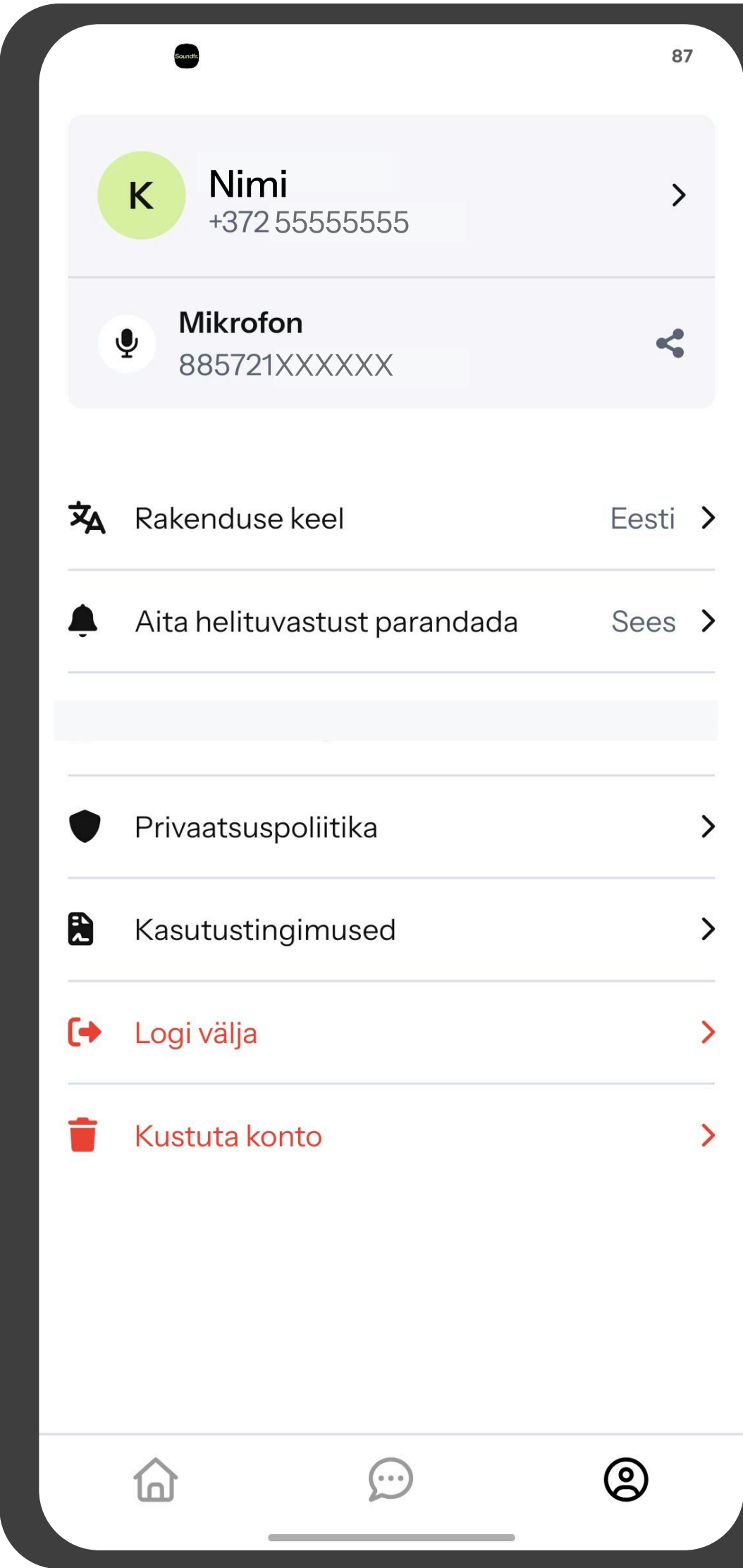

- Konto nimi ja telefoninumber millega registreeriti
- Ühendatud mikrofoni seerianumber
- Rakenduse keel, mida on võimalik peale vajutades muuta
- Võimalik parandada treenitud helisid andes tagasidet tuvastuse täpsuse osas valides kas tuvastus oli õige või vale
- Kontol välja logides lõpetab helituvastus töötamise ja rakenduse kasutamiseks on vajalik uuesti sisse logida
- Konto kustutamisel lõpetatakse kõne tekstiks tellimus koheselt ja helituvastus tellimuse lõpetamiseks on vajalik võtta ühendust Soundfr klienditoega.

Korduma kippuvad küsimused

Laadimine

Soundfr lahendus toimib ainult vooluringis olles ja seadmel puudub aku. Laadimis juhtme välja tõmbamisel lõpetab rakendus töötamise.

Nutikella teavituste lubamine

Nutikella menüüs vajutades “Halda teavitusi” nupule, leidke Soundfr rakendus ja kinnitage, et teavitused on selle rakenduse jaoks lubatud.

Mikrofon ei ole ühendatud

Kui mikron näitab, et ei ole ühendatud, siis veenduge, et mikrofoni peal põleb roheline tuli. Veenduge, et olete Wi-Fi võrgus, kus mikrofoni ühendasite.

Rakenduse sulgemine

iOS: Helituvastuse toimimiseks peab rakendus jääma avatuks. Pärast rakenduse avamist võite selle taustale jätta, kuid ärge sulgege seda täielikult.

Android: Helituvastus jätkab töötamist ka taustal. Selle täielikuks peatamiseks avage Seaded → Rakendused → Soundfr ja vajutage „Sundpeatamine“.

Helide treenimise arv

Hetkel puudub piirang uute helide treenimisel.

Tuvastuste intervall

Ühe tuvastuse teavituste vahe on 20 sekundit. Ehk kui tuvastus on toimunud, näiteks “Koputus” heli puhul, siis järgmine teavitus sama heli puhul saadetakse välja 20 sekundi pärast.

Heli tuvastamine

Helide tuvastamine toimub ainult, kui Soundfr mobiilirakendus on ühendatud mikrofoni ja asub telefoniga samas WiFi võrgus. WiFi võrgust väljudes helide tuvastus lõpetab toimimise ja alustab uuesti kui telefon saab uuesti ühenduse seadistatud WiFi-ga.

SKA soodustus

Abivahend võimaldatakse soodustingimustel isikutele, kes vastavad kõigile järgnevatele kriteeriumitele: esineb probleem välis-, kesk- ja/või sisekõrva struktuurides, esineb kuulmislangu alates 50 dB. Tõendi saavad välja kirjutada: perearst, üldarst, arst-resident, eriarst, rehabilitatsioonimeeskond, audioloog (ühekordne abivahendi vajaduse tuvastamine ja tõendi väljastamine) ISO kood: 22.27.09

Küsimuste korra saab võtta ühendust Soundfr klienditoega:

Email: info@soundfr.ee

Facebook: Soundfr

Veebilehe vestlusaknas: www.soundfr.ee